



谱线校准汞氩灯



特点

SMA905 接头 (FC 接头可选)


寿命为 3000 小时

波长范围 253-1700nm

灯具外壳上印有校准线, 易于使用

校准光源。产生汞和氩原子发射线用来校准光谱仪。

操作方便。仅需电源和光纤就可以和光谱仪系统整合。

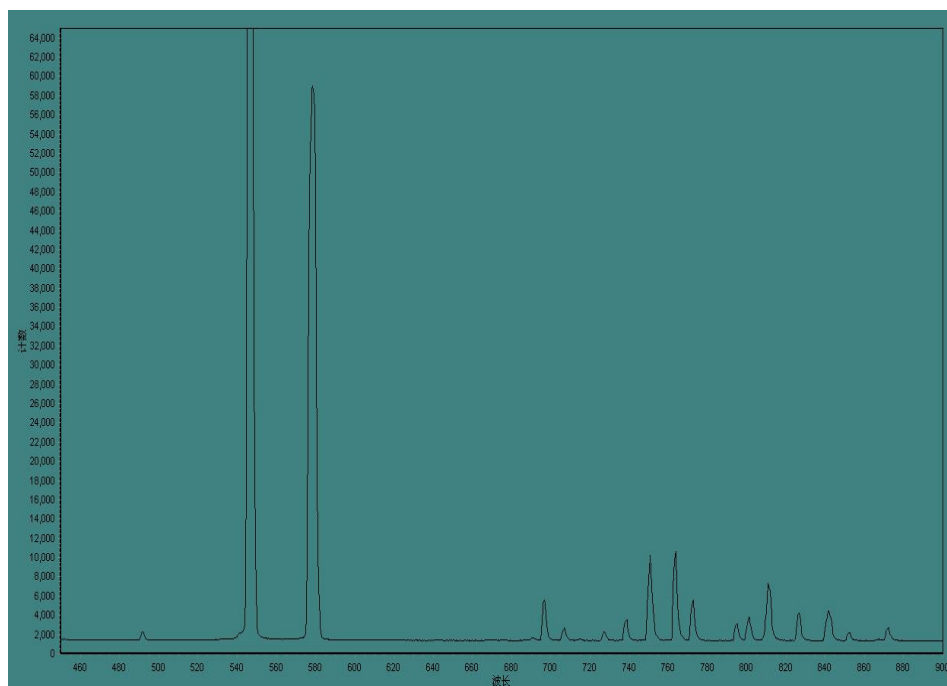



Peak↵	Lamp↵	Peak↵	Lamp↵	Peak↵	Lamp↵
253.652↵	Hg↵	1047.005↵	Ar↵	1327.264↵	Ar↵
296.728↵	Hg↵	1067.357↵	Ar↵	1331.321↵	Ar↵
302.150↵	Hg↵	1107.887↵	Ar↵	1336.711↵	Ar↵
313.155↵	Hg↵	1144.183↵	Ar↵	1350.419↵	Ar↵
334.148↵	Hg↵	1148.811↵	Ar↵	1362.266↵	Ar↵
365.015↵	Hg↵	1166.871↵	Ar↵	1367.855↵	Ar↵
404.656↵	Hg↵	1171.949↵	Ar↵	1371.858↵	Ar↵
407.783↵	Hg↵	1211.233↵	Ar↵	1382.572↵	Ar↵
435.833↵	Hg↵	1213.974↵	Ar↵	1390.748↵	Ar↵
546.074↵	Hg↵	1234.339↵	Ar↵	1409.364↵	Ar↵
576.960↵	Hg↵	1243.932↵	Ar↵	1504.650↵	Ar↵
579.066↵	Hg↵	1248.766↵	Ar↵	1517.269↵	Ar↵
866.794↵	Ar↵	1270.228↵	Ar↵	1532.934↵	Ar↵
912.297↵	Ar↵	1273.342↵	Ar↵	1598.949↵	Ar↵
922.450↵	Ar↵	1280.274↵	Ar↵	1694.058↵	Ar↵
935.422↵	Ar↵	1295.666↵	Ar↵	1704.288↵	Ar↵
965.779↵	Ar↵	1300.826↵	Ar↵	↵	↵
978.450↵	Ar↵	1322.811↵	Ar↵	↵	↵

参数规格

型号	HG12
品名	汞氩灯
波长范围	253 - 1704nm
尺寸	13.5 x 8.5 x 4.5 cm
重量	40 g
耗电量:	250 mA at 12 VDC
电源要求	12 VDC (包含在产品内)
灯泡寿命	约 3,500 小时 (20 毫安条件下)
孔径	3 mm
连接器	SMA 905 或 FC